

FLUXOMATIC®

Pressoterapia peristaltica settoriale differenziata



7 settori

9 settori

Kimed ITALIA - BENESSERE CERTIFICATO

FLUXOMATIC è un'apparecchiatura per pressoterapia progettata e costruita per un impiego costante sia in campo sportivo, fisioterapico che estetico. Differenti programmi ed il controllo continuo della

pressione su ogni singolo settore, assicurano un'utilizzo semplice e preciso. Il sistema di gambale adottato permette all'operatore di posizionare con facilità i settori nelle zone interessate. I 50 consigli terapeutici inseriti

nel suo software consentono di effettuare applicazioni in sicurezza ed efficacia. Tutto questo si traduce in una migliore qualità del servizio offerto aumentando la redditività del vostro ambulatorio.

FLUXOMATIC®

Pressoterapia peristaltica settoriale differenziata



7 settori

9 settori

Kimed ITALIA - BENESSERE CERTIFICATO

FLUXOMATIC è un'apparecchiatura per pressoterapia progettata e costruita per un impiego costante sia in campo sportivo, fisioterapico che estetico. Differenti programmi ed il controllo continuo della

pressione su ogni singolo settore, assicurano un utilizzo semplice e preciso. Il sistema di gambale adottato permette all'operatore di posizionare con facilità i settori nelle zone interessate. I 50 consigli terapeutici inseriti

nel suo software consentono di effettuare applicazioni in sicurezza ed efficacia. Tutto questo si traduce in una migliore qualità del servizio offerto aumentando la redditività del vostro ambulatorio.

ROBUSTA

È stata progettata e realizzata per vincere il tempo, il materiale impiegato per la costruzione viene accuratamente selezionato e sottoposto a rigorosi controlli. Anche il gambale è stato confezionato utilizzando i migliori tessuti impermeabili per garantire igiene e robustezza.

SICURA

È stata progettata e costruita nel rispetto delle regole tecniche e normative vigenti per poter garantire la massima sicurezza all'utilizzatore ed ai pazienti sottoposti alle terapie. Il sistema di monitoraggio costante della pressione sui vari settori assicura una terapia piacevole ed efficace.

50 CONSIGLI TERAPEUTICI

La macchina dispone di 50 programmi già inseriti studiati in collaborazione con i migliori professionisti di settore per garantire la massima efficacia in riferimento alla patologia in totale sicurezza e operatività.

DISPLAY


È dotata di un ampio display grafico che consente di visualizzare velocemente e chiaramente tutte le funzioni principali di programmazione e di erogazione.

KIT GAMBALE

FLUXOMATIC è dotata di gambale a settori per permettere una facile e precisa applicazione. In caso di sostituzione di uno o più settori la stessa può avvenire con estrema rapidità senza la necessità di un intervento tecnico.

DESIGN E DIMENSIONI COMPATTE

Particolare cura è stata dedicata alle linee morbide, eleganti ed ergonomiche disegnate non trascurando le dimensioni compatte che fanno di FLUXOMATIC lo strumento ideale per garantire agibilità ed operatività.

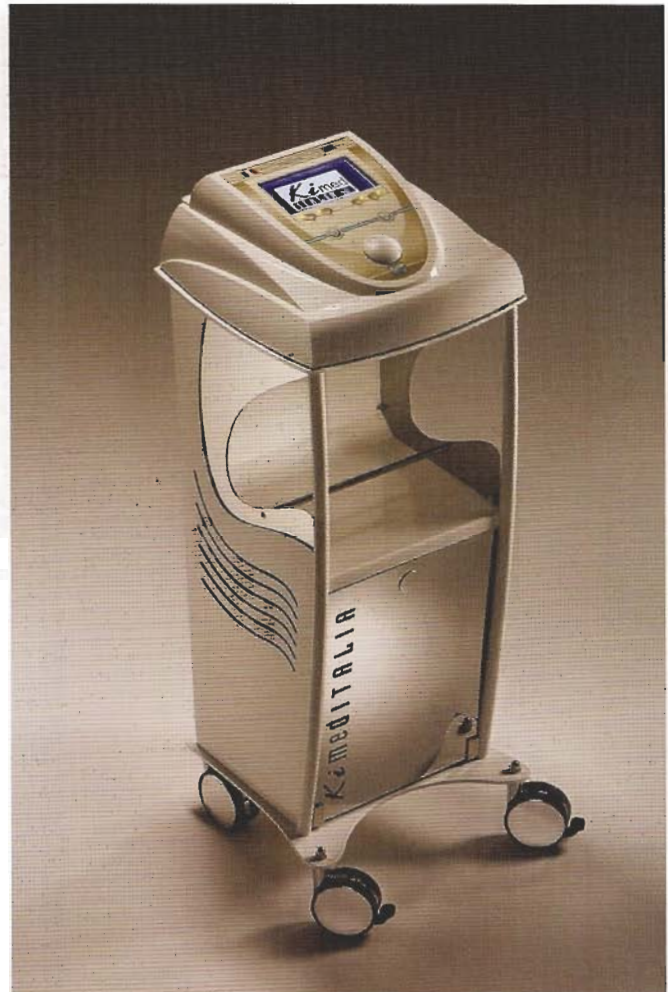

FLUXOMATIC	7	9
Numero settori pneumatici	7	9
Potenza massima assorbita dalla rete	220 VA	220 VA
Consigli terapeutici memorizzati	50	50
Tempo di trattamento programmabile	Da 1 a 60 minuti	Da 1 a 60 minuti
Display LCD retro-illuminato	grafico 240 x 128 pixel b/n LCD TFT da 6 pollici	
Regolazione pressione e tempo indipendente per ogni settore		
Pressione massima	200 mm Hg	200 mm Hg
Alimentazione da rete	230 Vac 50-60Hz	230 Vac 50-60Hz
Doppio fusibile di protezione sulla rete	1,6 AT 5 x 20 mm	1,6 AT 5 x 20 mm
Contenitore carrellato in lamiera verniciata a caldo ed acciaio inox lucido, dimensioni esterne	34 x 35 x 93 cm	34 x 35 x 93 cm
Peso corpo macchina	30 Kg	30 Kg



GENERAL TRADING SAN MARINO SRL

Via Degli Angariari, 25 - 47891 Falciano R. S. M. - Tel. 0549.909775 - Fax 0549.970506
e-mail: generalt5@gt.191.it - www.Kimed.it