




holter pressorio / ecg

La linea holter **custo med** rappresenta da sempre un punto di riferimento nello sviluppo di questa metodica. Registratori affidabili, compatti e leggerissimi dalle prestazioni eccezionali. Software potenti, semplici ed efficaci. L'introduzione della tecnologia di trasmissione bluetooth e la memoria tramite SD memory card permette in pochi istanti di trasferire l'esame su PC.

Tutto allo scopo di aiutare il medico nello studio dei tracciati.

euro_holter è un sistema Holter completo che comprende:

- registratore holter (screen, flash)
- pc con software preinstallato personalizzabile
- monitor e stampante laser

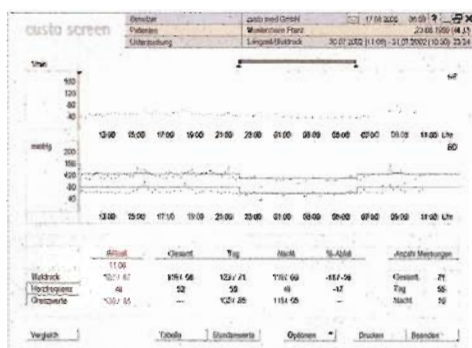


Sommario, valori tabellari, funzione confronto esami e panoramica di più giorni di misura sono solo alcune delle possibilità che vi offre il sistema.

Gestione facilitata della fase giorno/notte con un'intuitiva finestra grafica che aggiorna automaticamente la colorazione grafica ed i valori medi.



SCREEN 210

Registratore holter pressorio Metodo oscillometrico / oltre 320 misure / misure con durata inferiore ai 30" / fino a 3 gg di misurazioni / Intervalli di misura programmabili / trasmissione dati infrarossi / display a cristalli liquidi / Dimensioni e peso: 96 x 62 x 24 mm circa; 190 g

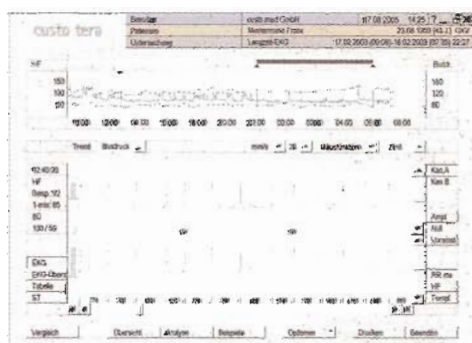

Nell'holter combinato (ecg e pressorio) In ogni istante di tracciato ecg sono disponibili i corrispondenti valori pressori. I due esami sono visualizzati in una sola schermata. La registrazione è sincronizzata: cambiando istante nel tracciato pressorio o ecg aggiornerete automaticamente l'altro esame.




SCREEN COMBINATO

Holter ecg e pressorio combinato. Integra holter ecg e pressorio in un solo dispositivo / 48 h di registrazione / sincronizzazione risultati / memoria a stato solido / tasto di event marker / dimensioni: modulo ecg: 96 x 24 x 24 mm / peso: 50 g

telemedicina / holter on line

La tecnologia **custo med** permette l'invio degli esami holter, tramite la rete, da una centrale periferica ad un centro di lettura. La funzione "short analysis", integrata nel registratore, consente di avere immediatamente disponibile un breve sommario dell'esame con gli eventi più importanti. Il referto, dalla centrale di lettura può essere inviato alla sede periferica tramite email oppure visualizzato e stampato dal sito www.holter.it. Potete anche decidere di non acquistare il software e pagare solo per gli esami che effettivamente referrerete. L'accesso diretto al server vi permette di avere un software sempre aggiornato e poter usare il registratore semplicemente connessi ad internet da qualsiasi computer disponibile, da qualsiasi località. Questa è la vera tecnologia **Holter on Line**.

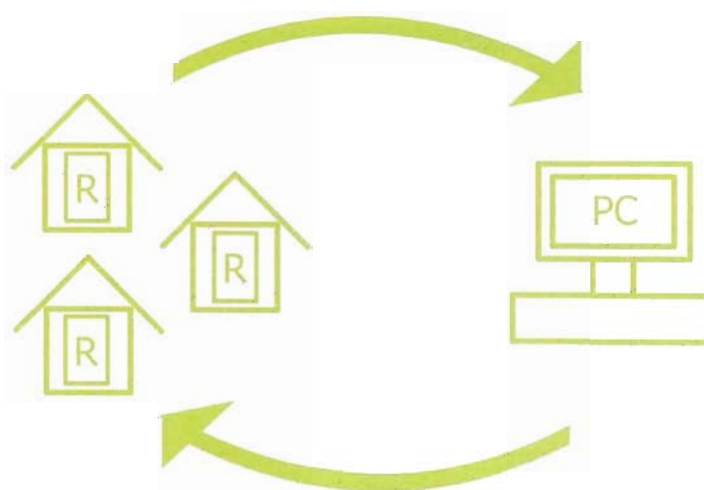

Il centro periferico, dotato di registratore, invia gli esami al centro di lettura che li restituisce refertati. La funzione avvio differito permette di programmare il registratore che verrà adoperato più tardi nel tempo.